


**Wakopak<sup>®</sup> Wakosil**

# HPLCアプリケーション

クロロフィル a,b の分析

分野：生体関連

クロロフィル a,b の分析

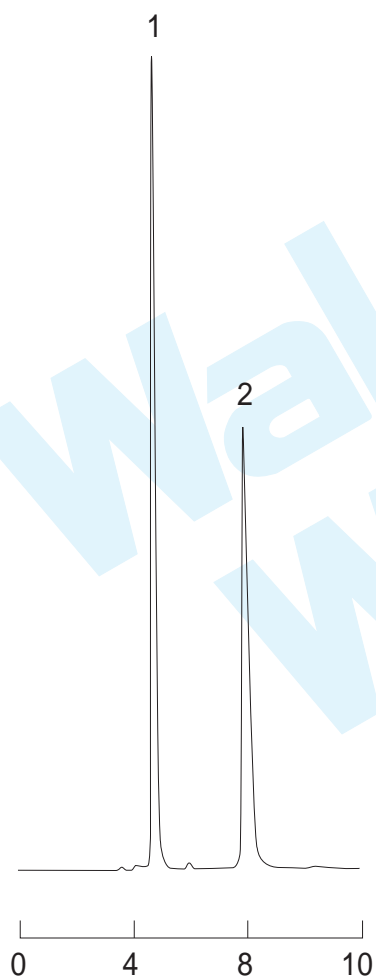

Column ; Wakosil 5SIL-120(4.6 \* 150mm)  
Eluent ; n-Hexane/2-Propanol=98.5/1.5(V/V)  
Flow rate ; 1.0ml/min. at 0  
Detector ; 0 6min. 430nm  
          ; 6min 460nm  
Sample ; 1) Chlorophyll a  
          ; 2) Chlorophyll b