


マイクロプレート専用小型遠心機 GYRO mini GM-01

脱水・脱泡(気泡抜き)

- ・ 脱水・脱泡(気泡抜き)(96、384、1536well対応)
- ・ コンパクトサイズ(ドラフトの中でも使用可)
- ・ 簡単なタッチパネル操作
- ・ 回転ドラム洗浄機能(洗浄液送液機能)

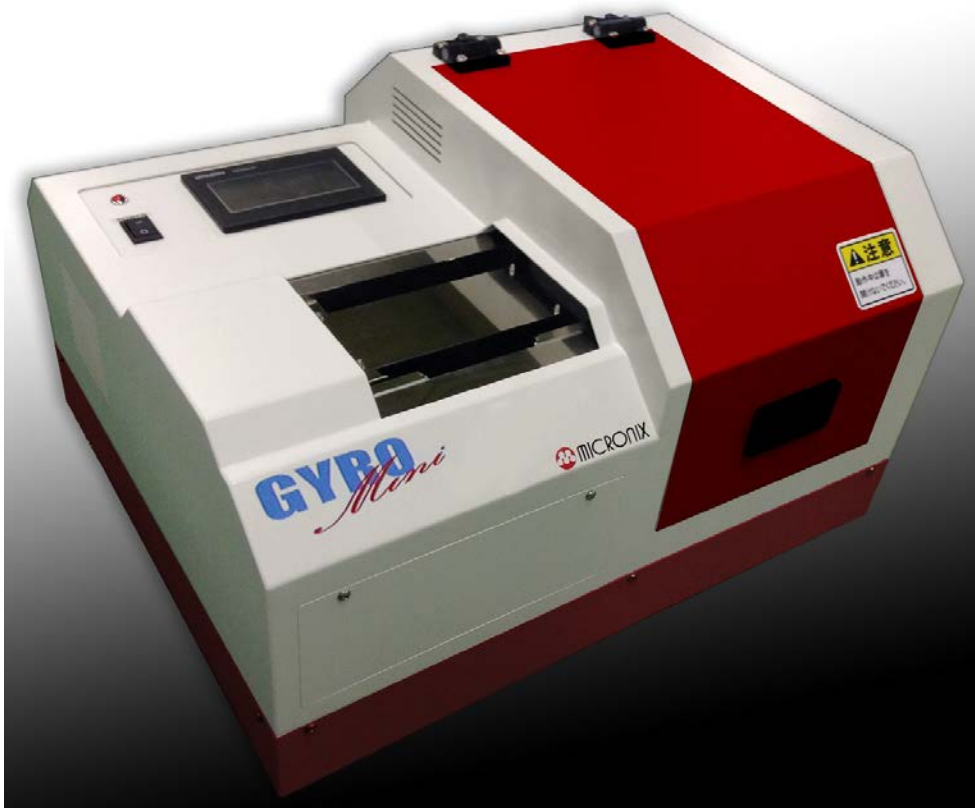


製品概要

GYRO mini GM-01 は、マイクロプレートの脱水、脱泡（気泡抜き）作業を簡単に素早く確実にを行う専用卓上小型遠心機です。

GYRO miniは、ジャイロウォッシャーGW-384のプレート遠心部に特化し、コンパクトサイズに改良しています。96well、384well、1536wellマイクロプレートに対応しており、システムへの組み込みも可能です。オプションの減圧ユニットをつければ、遠心部内を陰圧にでき、揮発性の高い有機溶媒や飛沫が心配なサンプルも安心して処理が行えます。

回転ドラムを回転させながら洗浄液（エタノール等）の送液が可能ですので、汚れ、廃液、培養液等を素早く洗い流せます。また、メンテナンス性もよく、ドラムも簡単に取外せ、手軽に洗えます。さらに、オートクレーブをすることも可能です。

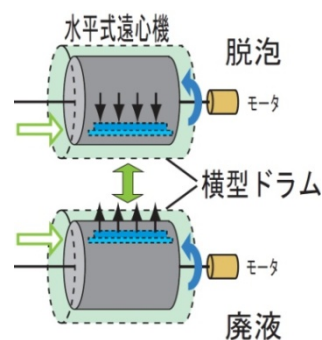

主な仕様

遠心方式	水平回転式
操作・設定	タッチパネル入力
プレート高さ範囲	高さ 9～27mm
プレート枚数	2枚
回転数	50～3000rpm
遠心時間	10～600sec
外部通信	RS232C
オプション	減圧ユニット(吸引ポンプ、HEPAフィルター等)
寸法	W520×D400×H270 (mm)
重量	28Kg
電源	AC100V 50/60Hz 10A

コード No.	品名	容量	希望納入価格(円)
-	GYRO mini GM-01	1台	2,800,000

※希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

※本カタログの内容は、予告なしに仕様、デザインを変更する事があります。※本カタログの記載内容は、2014年6月現在のものです。

【製造元】 マイクロニクス株式会社

【販売元】

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号

TEL: 06-6203-2759 (機器システム部)

東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

TEL: 03-3270-8124 (機器システム部)

●九州営業所 TEL: 092-622-1005 (代)

●東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代)

●東北営業所 TEL: 022-222-3072 (代)

●横浜営業所 TEL: 045-225-8041 (代)

●中国営業所 TEL: 082-569-8095 (代)

●筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)

●北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)