

高速マイクロプレートオートシーラー PS-3002LH


高速/低温フィルム対応

- ・ 高速処理(最短6秒/プレート)
- ・ DMSO 耐性フィルム使用
- ・ 低温で高密着にシール可能
- ・ マイクロプレートの再利用が可能



製品概要

PS-3002LH は、約110℃の低温で、最短6秒/プレートでシールすることができる高速マイクロプレートオートシーラーです。シール圧力を上げることで、低温でも高密着にシールすることができるので、サンプルへの温度の影響を軽減します。また、マイクロプレートのリムを溶かすことなくシールするため、マイクロプレートの再利用が可能で、廃棄・交換回数を減らすことができます。

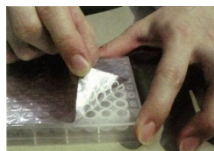

イージーピールフィルム
手で簡単に剥がせ、フィルムを交換して再シール・再保存が可能です。



パーマネントフィルム
チップは簡単に貫通できます。マイクロプレートは使いきりです。

主な仕様

処理時間	最短 6秒 / プレート
フィルムセット法	ロール交換式
シール加熱温度	室温 ~ 200℃ 任意設定 MEPL5-500の場合 約110℃~ (推奨温度120℃)
プレス方法	エア式 (シール圧力:約1800N)
スタート方法	パネルスイッチまたは外部信号
対応フィルム	PN-500 パーマネントフィルムPP 500M MEPL5-500 低温イージーピールロールフィルム MCEP-500 透明イージーピール ロールフィルム
寸法	W280×D480×H600 (mm) (フィルム部分を含む)
重量	35Kg
電源	AC100V 300W

コード No.	品名	容量	対応プレート材質	希望納入価格(円)
-	マイクロプレートオートシーラー PS-3002LH	1台	-	3,800,000
298-33451	PN-500 パーマネントフィルムPP 500M	500m/巻	PP	280,000
293-34241	MEPL5-500 低温イージーピールロールフィルム	500m/巻	PP/PS	280,000
293-34501	MCEP-500 透明イージーピール ロールフィルム	500m/巻	PP/PS	280,000

※希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

※本カタログの内容は、予告なしに仕様、デザインを変更する事があります。※本カタログの記載内容は、2013年10月現在のものです。

【製造元】マイクロニクス株式会社

富士フィルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号

TEL: 06-6203-2759 (機器システム部)

東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

TEL: 03-3270-8124 (機器システム部)

●九州営業所 TEL: 092-622-1005 (代)

●東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代)

●東北営業所 TEL: 022-222-3072 (代)

●横浜営業所 TEL: 045-225-8041 (代)

●中国営業所 TEL: 082-569-8095 (代)

●筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)

●北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)